


Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/lamp-demonstration-kit-i-p-288.html>

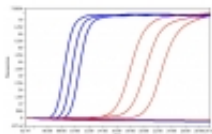

# LAMP Demonstration Kit I

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**DEM-001**

## Opis produktu

### LAMP Demonstration Kit I

Zestaw umożliwia zapoznanie się ze specyfiką reakcji w technice LAMP, zaobserwowanie czułości reakcji dzięki samodzielnemu przygotowaniu rozcieńczeń matrycy oraz zaznajomienie się z wynikiem reakcji LAMP, poprzez wizualizację produktów w rozdziale elektroforetycznym lub w systemie Real-time PCR.

Zestaw demonstracyjny (20 reakcji) zawiera:

- Isothermal Mastermix fluorescent dye + 3 pary starterów (specyficznym dla matrycy DNA)
- matrycę DNA *Deinococcus radiodurans*
- sterylną wodę
- protokół przygotowania reakcji z opisem spodziewanego wyniku

Aby przygotować reakcję należy wymieszać odpowiednie objętości podanych składników i prowadzić reakcję w 63 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 °C w czasie 30 min w systemie PCR lub Real-time PCR (detekcja przez kanał FAM).

Zestaw LAMP Demonstration Kit jest produktem darmowym - klient płaci jedynie za transport (19 zł netto).