


Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 21:12

Link do produktu: <http://www.novazym.sklep.pl/nova-20-bp-dna-ladder-50-g-p-315.html>

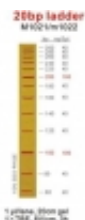

Nova 20 bp DNA Ladder, 50 ?g

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy


MA1000-20

Opis produktu

Nova 20 bp DNA Ladder, 50 ?g

Nova Marker 20 pz jest zalecanym wzorcem wielkości przy rozdziale dwuniciowych fragmentów DNA o długości od 60 pz do 300 pz.

W skład markera wchodzi 13 prążków o następującej długości: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 pz. Prążki 100 pz i 200 pz świecą intensywniej.

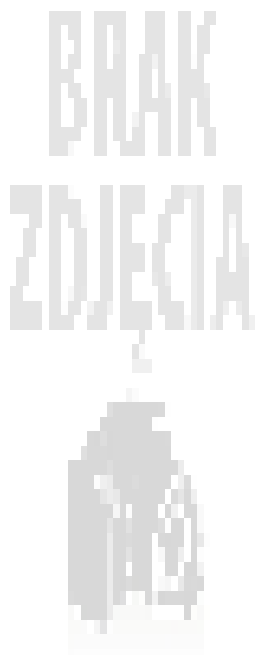

Uwaga: Zalecamy nakładanie na żel 2 - 5 ?l markera.

Zalecane warunki elektroforezy: 1 ?l na linię, 20 cm ,10% żel poliakrylamidowy, 1×TBE, 8V/cm, 3h.

Dostępny w ilości: 50 mg

Stężenie mieszaniny: 128 ng/?l

Krótkotrwałe przechowywanie: +4°C
Długotrwałe przechowywanie: -20°C